

 **ICONIX**[®]
BRACKETS ESTÉTICOS

AO
AMERICAN


SU ELECCIÓN ESTÉTICA DE CONFIANZA

Un toque de estilo ayuda a que los pacientes se vean y se sientan mucho mejor durante el tratamiento. Los brackets Iconix proporcionan resultados fiables con un bracket duradero, estético y muy elegante. Nuestro proceso de fabricación patentado y único garantiza que el bracket mantendrá su apariencia y color "champagne" durante el transcurso de todo el tratamiento.




UNA BELLEZA TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA

Con la confianza de los ortodoncistas en todo el mundo durante más de 30 años, los brackets Mini Master Series y Low Profile de American Orthodontics se caracterizan por un diseño visualmente intuitivo que facilita una mejor colocación del bracket para conseguir unos resultados óptimos. Nuestro avanzado proceso de fabricación permite ofrecer unas mediciones muy precisas tanto en la ranura como en las dimensiones del bracket. Cada bracket recibe un tratamiento térmico para aportarle mayor dureza. Un proceso rotatorio final, recubrimiento estético e inspecciones rigurosas aseguran un bracket de alta calidad y muy estético. Todos los brackets Iconix presentan las tecnologías patentadas de torque y angulación diagonal, diferenciándolos de cualquier otro sistema convencional de brackets gemelares metálicos, ofreciendo los resultados deseados con menos descementados de brackets y deformaciones de los arcos.

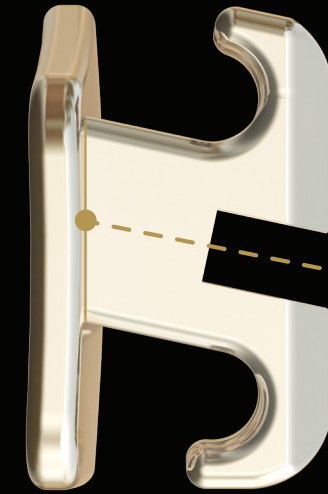

TORQUE DIAGONAL

El diseño patentado de torque diagonal posibilita que el centro de la ranura quede por encima del centro de la base del bracket, proporcionando una expresión más predecible del torque. Esto permite el perfil más bajo posible, ayudando a reducir la interferencia oclusal.

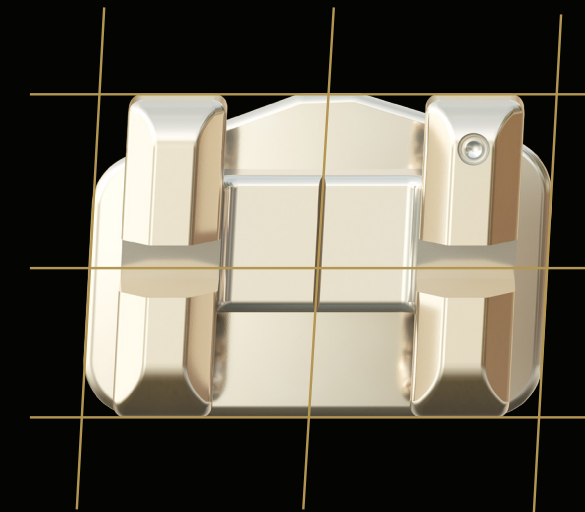

ANGULACIÓN DIAGONAL

La angulación está diseñada en cada bracket y base. Todas las guías de orientación visual horizontales van paralelas al plano oclusal y las guías verticales van paralelas al eje longitudinal del diente haciendo más simple y precisa su colocación durante el cementado.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CUERPO DEL BRACKET DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD

La durabilidad y el deslizamiento mecánico del acero inoxidable ofrece un bracket resistente y efectivo que no se romperá durante el tratamiento.

ACABADO EN TONOS CHAMPAGNE

Presenta un acabado final estético que se fusiona con los dientes a la perfección aportando un aspecto discreto pero sorprendente.

FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD

El mejor ligado del sector* con un espacio de aleta más que suficiente para todas las opciones de ligado y el pulido de la ranura, ayudan a optimizar el movimiento dental mientras se minimiza la deformación de los arcos durante el tratamiento.


DISEÑO REDONDEADO Y DE BAJO PERFIL

Mejora la comodidad del paciente y reduce la interferencia oclusal.

FUERZA DE ADHESIÓN

La base del bracket Maximum Retention™ utiliza una retención mecánica doble con una malla de calibre 80 micras encima de una base grabada. Estas ranuras grabadas fotoquímicamente incrementan el área de la superficie de retención para una adhesión mecánica superior a la vez que proporciona una reposición y descementado igual que en un bracket metálico gemelar.

*Un reciente estudio interno de AO, a ciegas, de la habilidad para el ligado de brackets, puntuó los brackets Mini Master Series como los mejores con respecto a otros brackets gemelares metálicos de la competencia.

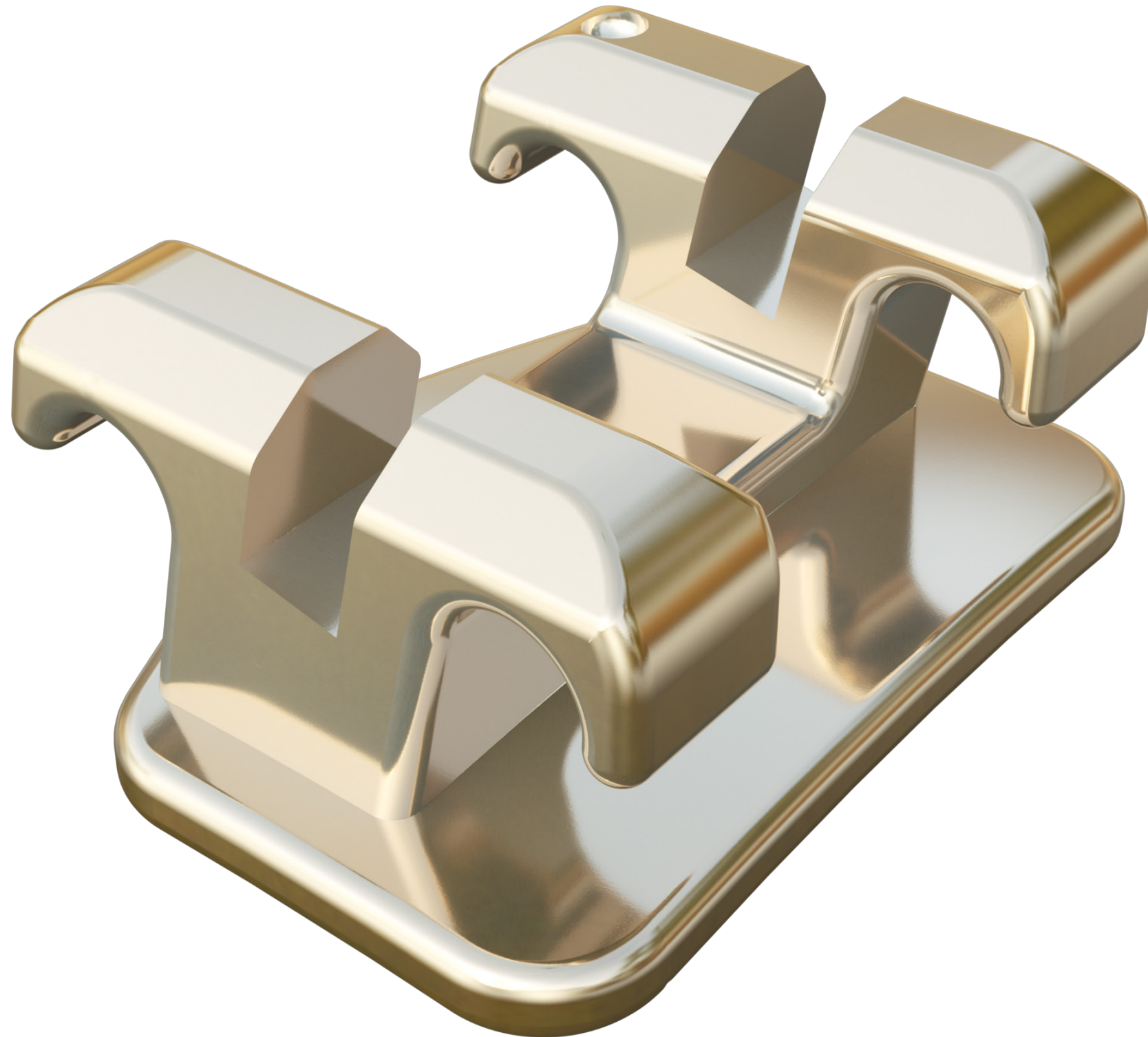

UNA IMAGEN DE CONFIANZA

Los brackets estéticos Iconix le permiten alinear las sonrisas de sus pacientes con confianza. El espectacular acabado de Iconix se fusiona perfectamente con los dientes y permitirá a sus pacientes sentirse orgullosos de mostrar su sonrisa.

VERSATILIDAD DEL TRATAMIENTO

Usted puede conseguir la máxima versatilidad en el tratamiento combinando Iconix con la amplia gama estética que ofrece American Orthodontics, incluyendo Radiance Plus y Empower Clear.

OPCIONES DE COMBINACIONES CON ICONIX

ICONIX/SUPERIOR E INFERIOR

Los brackets estéticos Iconix en ambas arcadas proporcionan una apariencia sutil que hará que sus pacientes sonrían con confianza.



RADIANCE SUPERIOR/ICONIX INFERIOR

Para una mayor durabilidad mandibular, combine Iconix en la parte inferior con los brackets monocristalinos Radiance Plus en la parte superior.



EMPOWER CLEAR SUPERIOR/ICONIX INFERIOR

Los brackets Empower Clear de autoligado ofrecen una opción interactiva o pasiva con un cuerpo cerámico y un clip revestido de rodio. Este bracket tiene una apariencia muy estética, proporcionando la funcionalidad que usted y sus pacientes precisan.

TÉCNICAS

MAXILAR

	Central		Lateral		Cuspide		1 ^{er} Bicuspid		2 ^{do} Bicuspid		1 ^{er} Molar		2 ^{do} Molar						
	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.			
McLaughlin, Bennett, Trevisi	+17	+4	+10	+8	-7/0	+8	0	-7	0	0	-7	0	0	-14	0	10	-14	0	7
Sistema Compatible Roth	+12	+5	+8	+9	-2	+10	4	-7	0	2	-7	0	2	-10	0	14	-10	0	7
Alexander LTS	+15	+5	+9	+9	-3	+10	0	-6	0	0	-8	+4	0	-10	0	13	-10	0	10
V-Slot / Ranura Vertical	+14	+5	+8	+9	-2	+10	0	-7	0	0	-7	0	0	-10	0	14	-10	0	10

MANDIBULAR

	Central		Lateral		Cuspide		1 ^{er} Bicuspid		2 ^{do} Bicuspid		1 ^{er} Molar		2 ^{do} Molar						
	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.			
McLaughlin, Bennett, Trevisi	-6	0	-6	0	-6/0	+3	0	-12	+2	0	-17	+2	0	-20 +2 ^{OPT.}	0	-10 +2 ^{OPT.}	0		
Sistema Compatible Roth	0	0	0	0	-11	+7	2	-17	0	4	-22	0	4	-25	0	8	-30	0	7
Alexander LTS	-5	+2	-5	+6	-7	+6	0	-7	0	0	-9	0	0	-10 -6 ^{OPT.}	8	0	0	5	
V-Slot / Ranura Vertical	0	0	0	0	-7	+7	0	-11	0	0	-17	0	0	-25 -6 ^{OPT.}	8	-25	0	7	

ICONIX[®]
A E S T H E T I C B R A C E S

* Las versiones de American Orthodontics de los Sistemas de Roth y McLaughlin, Bennett, Trevisi no pretenden ser un duplicado de ningún otro, ni implican que estén respaldadas por los Dres. Roth, McLaughlin, Bennett o Trevisi.



Teléfono: +34 910 612 630
+34 973 982 720

Email: aospain@americanortho.com

Web: www.americanortho.com

BRACES
MADE IN THE USA

©2019 American Orthodontics Corporation
Todos los Derechos Reservados

SIGUENOS EN
